

UROMIC Jive

Modulární urodynamická aparatura UROMIC Jive poskytuje vše, co je třeba pro standardní urodynamické vyšetření. Měřit lze 5 snímači připojenými kabely a další snímače připojit bezdrátově.



• Software pro všechna urodynamická měření dle ICS i originální měřicí protokoly, které zlepšují a urychlují funkční diagnostiku.

• Program pro biofeedback, 4kanálová anorektální manometrie.



• Velmi kvalitní mechanické jednotky pumpy a sterilizovatelného profilometru jako u ostatních přístrojů UROMIC vyšší třídy.

• Podpora všech snímačů tlaku (T-DOC, Micro Tip i klasické snímače tlaku pro přenos tlaku vodním sloupcem.

• Připojení bezdrátových snímačů (např. uroflowmetr DanFlow 3000).

Základní verze ve formě kompaktního přístroje na podvozku s nastavitelnou výškou klávesnice a monitoru.

Další modely UROMIC Jive jsou přenosné verze v kufříku nebo na stojanu, řízené externím počítačem, či plná verze integrovaná do vyšetřovacího stolu TryTable.

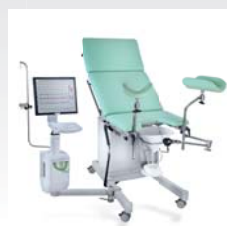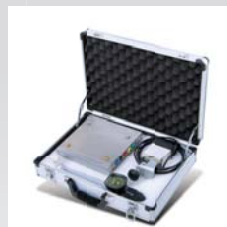

Uroflowmetry a uroflowmetrické snímače

DanFlow 1000 a 1100

Kompaktní přístroje pro řízení měření a vyhodnocení signálu z průtokových senzorů – uroflowmetrů.



- Mají vestavěnou termotiskárnu, unikátní je automatická trvalá archivace měřících protokolů na vestavěnou SD kartu.

- DanFlow 1000 připojuje uroflowmetrický snímač kabelem.

- DanFlow 1100 připojuje uroflowmetrický snímač bezdrátově.



Uroflowmetrické snímáče jsou váhového typu, ale lze připojit i **rotační snímáče („spinning disk“)**. Dva různé stojany se snadným nastavením výšky, sedák a závěs snímáče do držáku diagnostického stolu TryTable.



Uroflowmetrický snímač **DanFlow 2000** se připojuje kabelem k přístrojům UROMIC, k jednotce DanFlow 1000 pomocí jednotky DanFlow 2000 ke standardnímu počítači s operačním systémem Windows.



Snímáče **DanFlow 3000** má vestavěný radiomodul a připojuje se bezdrátově k přístrojům UROMIC, k jednotce DanFlow 1100, k jednotce ambulantní urodynamiky SALSA a pomocí dongle USB adaptéru s anténkou k standardnímu počítači s operačním systémem Windows.

Příslušenství



Externí EMG zesilovač



Uroflowmetr s křeslem



Uroflowmetr na ekonomickém stojanu



Profilometr na stojanu

